



# Catéter PICC:

## *Guía para el paciente y la familia*

Es un dispositivo con forma de tubo largo, delgado y flexible, que generalmente se introduce a través de una vena en la parte interna del brazo y va hasta una vena grande cerca del corazón.

Puede realizarse con o sin ayuda de ecografía y, en algunos casos (pacientes pediátricos) se realiza en cirugía con sedación o anestesia general.

Este catéter se cubre con un apósito transparente que lo mantiene limpio, protegido y en la posición adecuada.

**El PICC puede usarse en pacientes de cualquier edad y tiene como objetivo reducir el riesgo de eventos relacionados con la infusión de medicamentos, nutrición o líquidos irritantes, facilitar la extracción y suministro de sangre.**

**El mantenimiento o curación del catéter debe realizarse cada 7 días, únicamente por personal capacitado.**


## Tenga presente que:

Doblar, estirar el brazo o realizar actividades cotidianas no interfiere con el catéter.

# Recomendaciones para el cuidado en casa:



- Asegúrese de la permeabilidad del catéter, verificando que no haya retorno de sangre. Si nota algún cambio, repórtelo inmediatamente al personal de salud.
- Cerciórese de que el catéter haya sido irrigado durante el procedimiento de curación o mantenimiento.
- El brazo en el que se ubicó el dispositivo no debe punccionarse por ninguna razón hasta que se le retire el catéter.
- Evite realizar actividades que requieran mucha fuerza o movimientos repetitivos, como levantar objetos pesados con el brazo intervenido, sobre todo en los primeros 2 días. Así como la toma de la presión en este brazo, los deportes bruscos o de contacto.
- Vigile constantemente que por el sitio de inserción no haya signos de infección como: hinchazón, enrojecimiento, salida de secreciones, dolor, calor o fiebre.
- Verifique la integridad del apósito: que no haya humedad o abombamiento de este, ni bordes desprendidos.
- Mientras tenga el catéter no debe nadar ni sumergirse en piscinas, mar, etc.
- Al salir de la casa, es recomendable cubrir el catéter con una manga de franela suelta y preferiblemente larga.
- Asistir a las citas de curación del dispositivo en la sede principal en forma programada y semanal. (horario de atención ambulatoria es de 7am a 4pm de lunes a viernes con cita previa.)

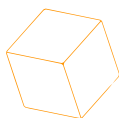

## Para el baño diario:

- Cubra la zona del catéter con una bolsa plástica y cinta de enmascarar.
- Mantenga el brazo alejado del agua para evitar humedad.
- Evite que los extremos del catéter cuelguen y toquen el agua del baño.

## Al recibir al personal de cuidado domiciliario, tenga en cuenta:

- El dispositivo no debe quedar doblado, acodado o con algún factor externo causando oclusión.
- Que el catéter quede en la posición adecuada.
- Asegure una correcta irrigación.
- En caso de oclusión persistente, contacte al Servicio de Terapia intravenosa de la Fundación Valle del Lili, al 3319090 ext. 7175.



## Diríjase a Urgencias si presenta:

- Fiebre superior a 38.3 °C
- **Signos y síntomas de infección:** hinchazón, enrojecimiento, salida de secreciones, dolor o calor.
- Desplazamiento parcial o total del catéter. Salida de líquido o sangre por la herida. Impedimento para pasar líquido por el catéter (oclusión).
- Salida de líquido o sangre por la herida. Impedimento para pasar líquido por el catéter (oclusión).



# Catéter PICC para pacientes pediátricos y neonatales:

## En caso de regresar a casa con el catéter:

- Vigile constantemente su integridad e higiene: que no esté ocluido o doblado y que permita la movilidad del niño sin halarlo.
- Asegúrese de que el dispositivo esté ubicado adecuadamente.
- Si esta bajo manejo de cuidado domiciliario, asegure la adecuada permeabilidad del dispositivo.

## Una vez retirado el catéter, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones durante los 3 días posteriores:

- Mantenga cubierta la herida.
- Evite humedecer la zona.
- Reemplace la cura si esta se cae.
- Diríjase a urgencias si presenta signos de infección.

Nombre:

### Identificación del catéter

C.PICC tipo:

No. Calibre:

Longitud:

No. Vías:

Localización: V. Basílica

V. Cefálica

V. Braquial

V. Axilar

MSD

MSI

Fecha inserción:

Fecha retiro:

Motivo inscripción:

Motivo retiro:

Complicaciones:

Para comentarios y sugerencias contacte al Servicio de Información y Atención al Usuario - SIAU

Ext. sede Principal: 4190 - 3805 - 4191 - 3864 - 4192

Ext. sede Limonar: 1423 - 1395 [siau@fvl.org.co](mailto:siau@fvl.org.co)

Av Simón Bolívar Cra 98 # 18-49

[www.valledellili.org](http://www.valledellili.org)



Cali, Colombia